

特别声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，以包装内实物为准。

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

西屋电气公司监制

制造商：江门西屋健康智能科技有限公司

地址：广东省江门市江海区福泽路12号2号厂房


产品服务热线：400-166-3600

 WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by JiangMen Westinghouse Small Kitchen Appliance Co., Ltd. All Rights Reserved.

5W

颈椎按摩仪

使用说明书 USER MANUAL


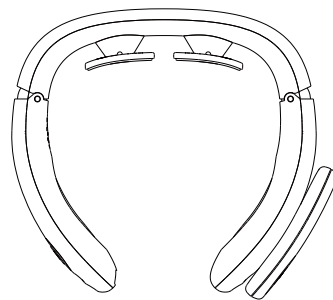


产品以实物为准


目 录

一、各部分构件名称	1
二、使用安全注意事项	3
三、技术参数	5
四、使用方法	6
五、环保清单	7
六、保修卡	8

一、各部分构件名称

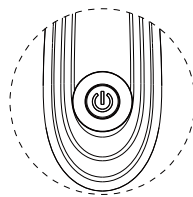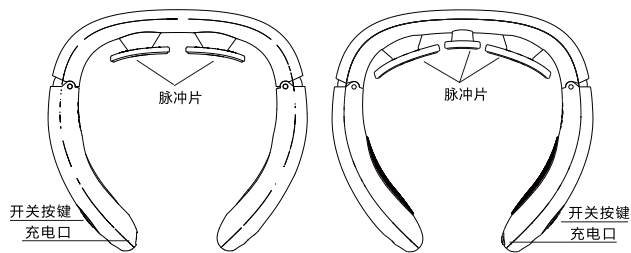


开关按键

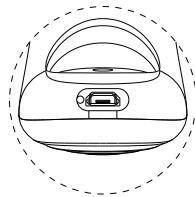


充电口


■ 遥控器

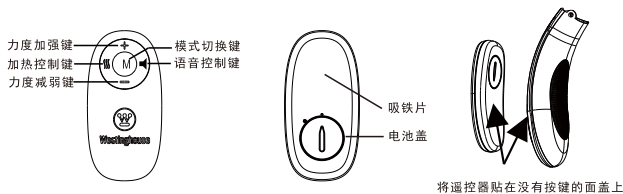

■ 遥控器电池安装拆卸步骤

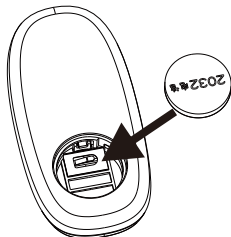

1. 如图所示，正级朝上放入卡槽内

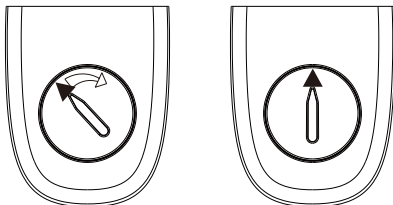

2. 如图，箭头对准大凸点，顺时针旋转电池盖

二、使用安全注意事项

▲ 注意

■ 请绝对不要与以下医用电子器材一起使用：

1. 心脏起搏器等体内植入型医用电子器材；
 2. 人工心肺等维持生命用医用电子器材；
 3. 心电图仪等医用电子器材；
- 同上医用电子器材使用时，会造成这些电子器械产生误动作，可能会危及生命。

如果患者在身上同时使用高频手术设备和本产品时，产品电极片部位可能引起烧伤，也可能损坏产品。

如果在短波或微波治疗设备附近使用（1m）本产品时，产品的输出可能不稳定。

按摩中电极片应避免接触伤口及瘢痕。

按摩时，电极片不可置于胸部心脏附近，否则会增加心脏纤颤的危险。

产品建议一个用户使用，交叉用户使用时，请清洁产品上的电极片后使用。

使用产品时应将电极片紧密的贴在皮肤上，均匀接触。

本产品电极片具有发热功能，同一部位长时间（超过15分钟）使用热敷功能时可能导致低温烫伤。

使用中或使用后出现身体不适，请停止使用并咨询医生。

本产品含有锂电池，请勿自行拆卸、改装、水浸产品或投掷火中，否则可能导致产品损坏爆炸。

4. 本产品使用的是锂离子电池，超过三个月不使用需要给设备重新充电一次，避免锂电池长期不使用放点导致无法启动设备。

■ 下列情形，请向医生咨询后使用。否则可能会发生事故或引起身体不适。

1. 正在接受医生治疗、并感觉身体不适的患者。
2. 心脏、脑神经异常的患者。
3. 体温超过38℃（发热期）的患者。
4. 感染性疾病的患者。
5. 皮肤知觉障碍或皮肤异常的患者。
6. 正在服用药物的患者。
7. 血压异常的患者。
8. 不能自由表达自己意愿的患者。
9. 由于糖尿病等造成高度末梢循环障碍而产生知觉障碍的患者。
10. 皮肤对不锈钢电极片过敏的患者。

■ 下列情形禁止使用

1. 恶性肿瘤患者。
2. 有出血倾向的患者。
3. 孕妇、产妇。
4. 急性化脓性炎症患者。
5. 心脏起搏器使用者。
6. 金属内置物患者。
7. 人体的心脏附近。

■ 安全注意事项

1. 请勿在心脏附近、颈部上方、头部、口腔、阴部或皮肤疾患等部位使用且不能同时治疗双脚脚底。使用时不要压迫内脏。否则可能会发生事故或引起身体不适。
2. 请勿与其它医疗器械或2台以上本产品一起使用，否则可能会引起恶心或身体不适。
3. 请勿用于使用说明书中所记载的按摩以外的目的，否则可能会发生事故或产品产生故障。
4. 请勿使用表面有缺口、损坏的电极片，否则可能会发生事故或产生故障。
5. 请勿擅自拆卸、修理和改造本产品，否则可能会导致故障或触电危险。
6. 如果因本产品异常而感到身体不适时，请立即停止使用。
7. 身体或皮肤如有异样的感觉，请咨询医生并遵医嘱。
8. 在按摩过程中，若想将电极片移动位置或其他人身上时，请务必将电源切断后再移动，负责可能会受到强烈电击。
9. 请勿带着电子器械进行使用本产品，否则可能会使电子器械误操作。
10. 当本产品不能正常工作时，请立即切断电源并取下，否则可能会产生高温或短路，发生事故，同时请联系售后客服咨询。
11. 请勿用湿手插拔USB充电线，否则可能会导致触电或发生事故。
12. 请勿给儿童或无表达意识能力的人使用，否则会引发事故或引起身体不适。
13. 请勿在浴室等湿度高的地方使用，或者边洗澡边使用本产品，否则可能会受到强烈电击，并损坏产品。
14. 睡觉时请勿使用，否则有可能损坏本产品，电极片有可能被移到其他部位而产生身体不适。
15. 驾驶汽车时请勿使用，否则可能因刺激过大引起身体不适，导致事故。
16. 请勿将电极片长时间贴在患处，否则可能会引起皮炎。
17. 在按摩时，请勿使用皮带、项链等物品的金属部位接触电极片，否则可能会受到强烈电击。
18. 请勿在同一部位长时间(30分钟以上)使用，否则可能使按摩部位肌肉疲劳引起身体不适。
19. 请正确佩戴本产品，用于颈椎部位，左右对称佩戴，否则可能会发生事故或引起身体不适。
20. 从产品上拔下USB充电线时，请勿拉拽充电线，而应握住充电线插头拔出，否则可能导致触电或损坏产品。
21. 产品电极片具有表面发热功能，对热不敏感或容易热过敏体质的用户使用前，请咨询医生。
22. 产品长时间使用时，表面会有发热的现象，这属于正常现象。
23. 遥控器电池长期(超过3个月)不使用时，请取出电池。
24. 遥控器电池电量不足时，请尽快更换同型号的新电池，电池型号：CR2032。
25. 遥控器电池更换时，切勿装反正负极。
26. 遥控器电池电量用完后，请按照居住地的相关规定进行废弃处理。

27. 请确认主机按钮正常工作后方可使用。

28. 初次使用时，或产品长时间搁置后电池电量损耗，请按照使用说明书进行充电，确保产品能正常工作。

29. 废弃本产品时，请依照当地有关环境保护规定进行处理，否则可能会造成环境污染。

30. 建议16周岁及以上人群使用。

■ 请勿在以下场所使用、存放本产品：

阳光直射的场所。

高温多湿的场所。

有水的场所。

灰尘较多的场所。

靠近火源附近的场所。

容易受到震动冲击的场所。

强电磁场所。

三、技术参数

型号	额定电压	额定功率	额定工作时间	热敷温度
WCM-U100	DC5V 1A	5W	15min	42±3°C
WCM-U200				
WCM-U201				
WCM-U202				
WCM-U203				
WCM-U230				
WCM-U240				
执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.10-2008				

所列参数为约数，由于我们在不断地改进我们的产品，因此如果技术参数有任何变动，恕不另行通知

四、使用方法

■ 指示灯

正常开机状态主机按键提示灯显示蓝色，低电量时语音播报“电量低请充电”同时按键指示灯显示红色，充电状态按键指示灯闪烁显示红色，充满电后按键指示灯显示红色


- 1.使用前，请先用湿毛巾将颈椎部位皮肤湿润，然后将产品戴到脖子上，使脉冲片紧贴颈椎部位，佩戴好产品后，开启主机并调节合适的按摩力度和模式。
- 2.长按主机“Ⓜ”按键3秒，主机开机（语音播报，提示灯亮起）开机后默认力度为0档，不加热。开机状态下长按“Ⓜ”按键3秒，产品关机。
- 3.遥控器“M”为模式键，按模式键可切换模式。共五个模式：自动组合模式、刮痧模式、推拿模式、敲打模式、针灸模式，每按一次，语音播报当前按摩模式。
- 4.遥控器“+”为力度加强键，每按一次，语音播报当前力度档位，强度递增一档，力度分为15档，在力度为15档时再按“+”力度不再变动，同时播报语音提示。
- 5.遥控器“-”为力度减弱键，每按一次，语音播报当前力度档位，强度递减一档，力度分为15档，在力度为0档时再按“-”力度不再变动，同时播报语音提示。
- 6.遥控器“🔥”为加热控制键，单击可以打开和关闭加热功能，同时语音播报提示，产品两个电极片发热温度控制在 $42\pm 3^{\circ}\text{C}$ 。
- 7.遥控器“🔊”为语音控制键，单击可以打开和关闭语音播报功能。
- 8.未正常佩戴，脉冲片与颈部接触不良或未开启任何功能，超过30s设备会自动关机。

五、环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件 (ABS)	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	○	○
电池组件	X	X	X	X	○	○
气泵组件	X	○	X	○	○	○
马达组件	X	○	X	○	○	○
USB线	X	○	X	○	○	○
海绵组件	○	○	○	○	X	X

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



环保使用年限标志

本产品的“环保使用年限”为10年，本企业根据产品设计特性制定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用年限”才有效。

- 注：1.以上表中未列明的，本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有害物质。
2.以上表中含有害物质的所有部件及其均质材料，均符合中国RoHS对有害物质限制使用的严格要求，请放心使用。

六、保修卡

产品保修卡

请仔细填写以下资料并妥善保存

客户及产品资料	
产品名称 _____	产品型号 _____
购买者姓名 _____	联系电话 _____
联络地址 _____	
产品编号 _____	

产品保修记录		
保修日期	保修内容	备注

* 温馨提示：保修卡涂改作废、遗失不补。

西屋电气公司监制

制造商：江门西屋健康智能科技有限公司

地址：江门市江海区福泽路12号2号厂房

产品服务热线：400-166-3600

保修卡注意事项

尊敬的用户：

感谢您选购使用我司产品！为了使用我们的服务让您更满意，购买后请认真阅读此保修卡并妥善保存。

- 1、自购买之日起，我公司对售出产品出现非人为因素的产品质量问题实行“七天包退，十五天包换，一年保修”的服务政策（个别产品行业规定除外）。退换产品时应保持商品本身、配件完整且无外观损伤和外包装完整。
- 2、以下情况不属于免费保修范围：

- 超出更换期、保修期。
- 无法提供产品保修卡、购买发票及私自涂改发票。
- 未经我司允许情况下改造、拆装或维修发生故障。
- 自然灾害等不可抗力因素造成的损坏。
- 保修凭证上的产品型号与商品实物不相符合。
- 未按照使用说明要求使用、维护、保管而造成的损坏。